

# セラビジョンスライド画像閲覧ソフトの操作マニュアル

## ログインからスライド画像を開く方法

1, PC画面上の下記アイコンをダブルクリックします。



2, ログイン画面が現れます。

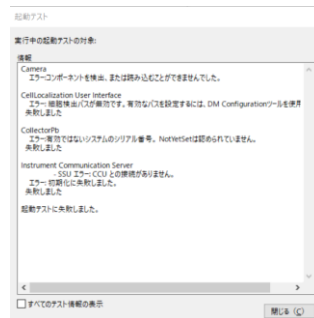
# CELLAVISION

CellaVision DM Software (DM9600)


ユーザー名:


パスワード:


3, パスワード：の空欄に、admin と入力して OK ボタンをクリックする。



4, 上記「起動テスト」が表示されたら、閉じるボタンをクリックする。

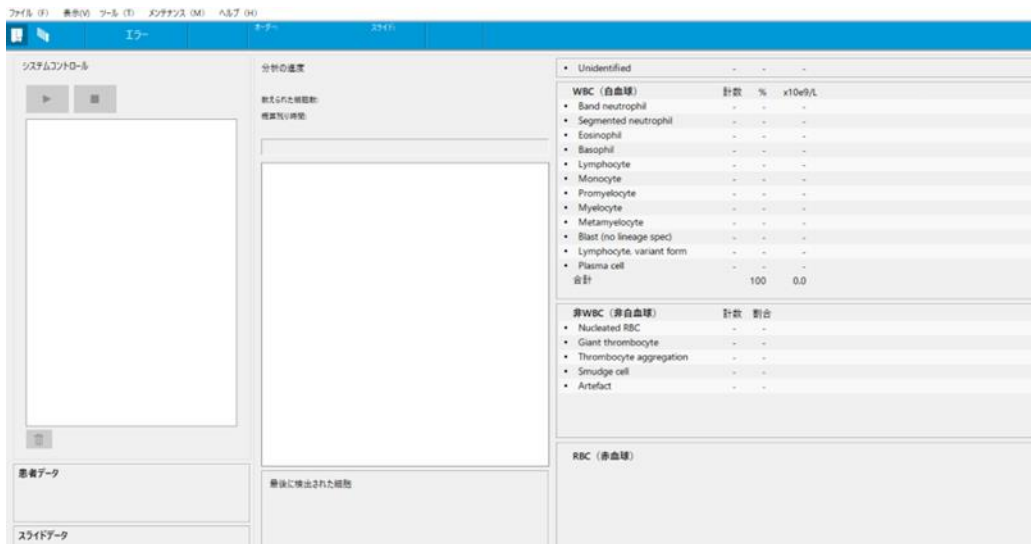

5, 左上の  をクリック、検索基準を「最新を表示する」から「すべてを表示」に変更

6,  をこのボタンを押すと検体リスト画面が表示されます。

## 検体リスト画面からスライド画像を開く方法

ファイル (F) 表示 (V) ツール (T) メンテナンス (M) ヘルプ (H)

エラー オーダー: 切 Syorei3 BM ✓ スライド: 1 ↓

ワークリスト

オーダーID	#
Shorei1 PB	1
Syorei2 PB	1
Syorei3 PB	1
Syorei1 BM	1
Syorei2 BM	1
Syorei3 BM	1

検索基準

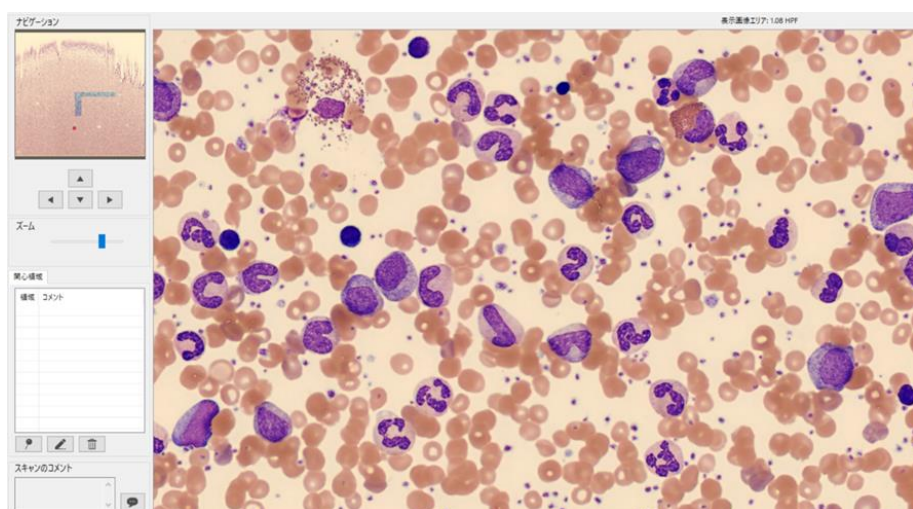
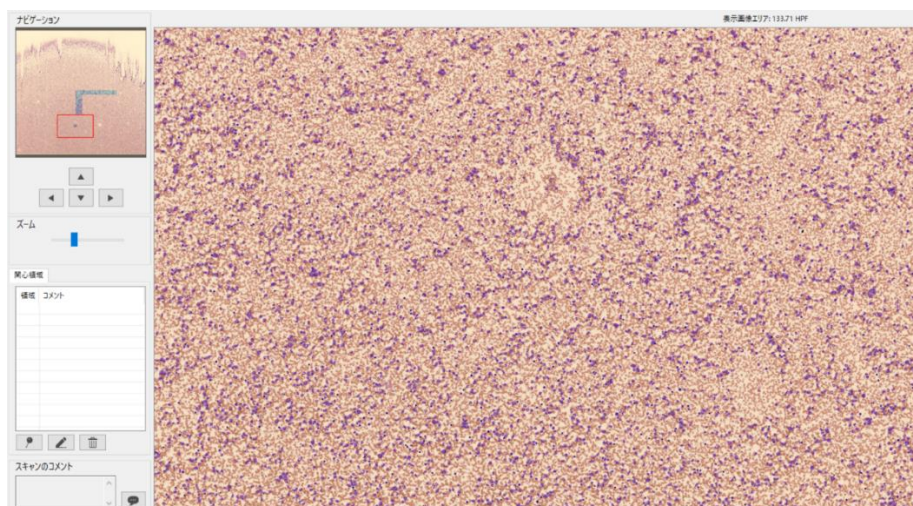
すべてを表示 2022/05/16 および 2022/05/23 すべてを表示

なし = [ ] = [ ]

☐ 正確な一致のみを表示

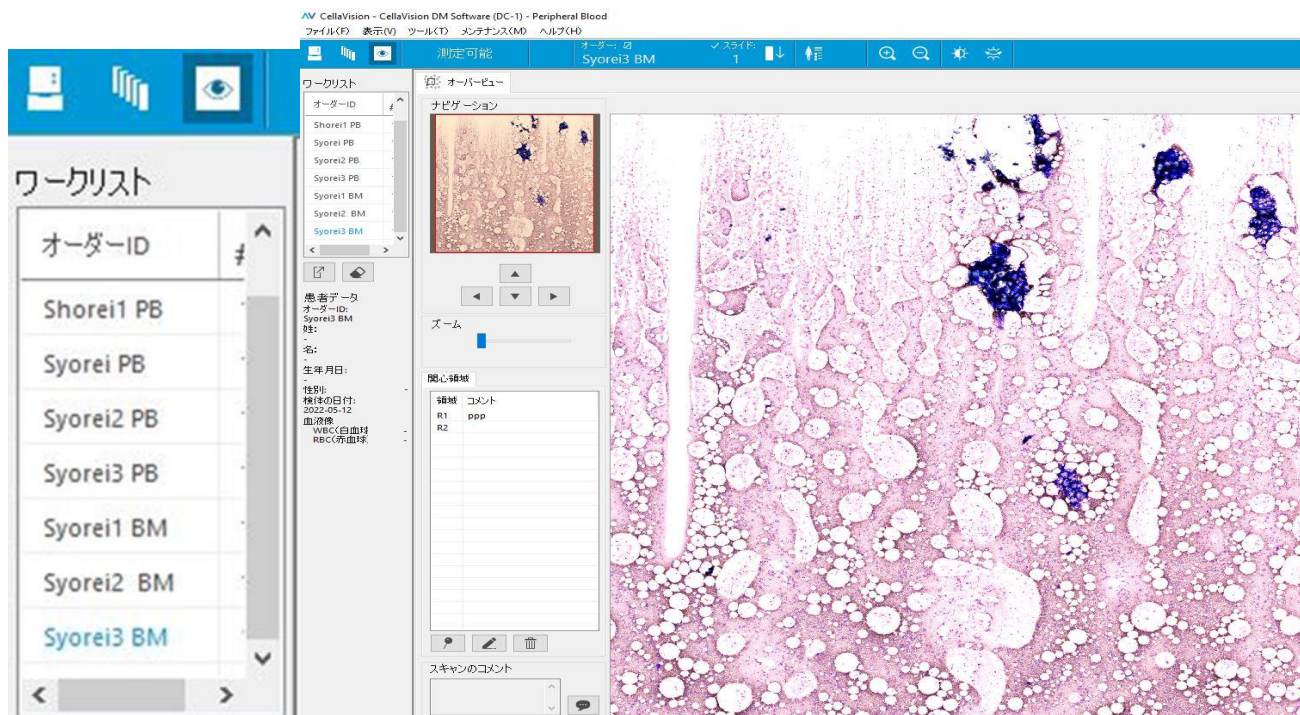
✓	🚩	▶	🖨	🗑	🔍	📄	📄	オーダーID	患者ID	名	姓	研究室	分析済み	オーダー
✓								Syorei PB					2022-05-16 13:00	
✓								Shorei1 PB					2022-05-13 15:31	
✓								Syorei2 BM					2022-05-12 13:31	
✓								Syorei3 BM					2022-05-12 12:24	
✓								Syorei3 PB					2022-05-12 11:17	
✓								Syorei2 PB					2022-05-11 14:30	
✓								Syorei1 BM					2022-05-11 12:58	
✓								Syorei1 PB					2022-05-11 11:49	

- 1, 検索基準が「すべてを表示」であることを確認
- 2, 「オーダーID」をダブルクリックします。次のようなデジタルスキャン画像が表示されます。




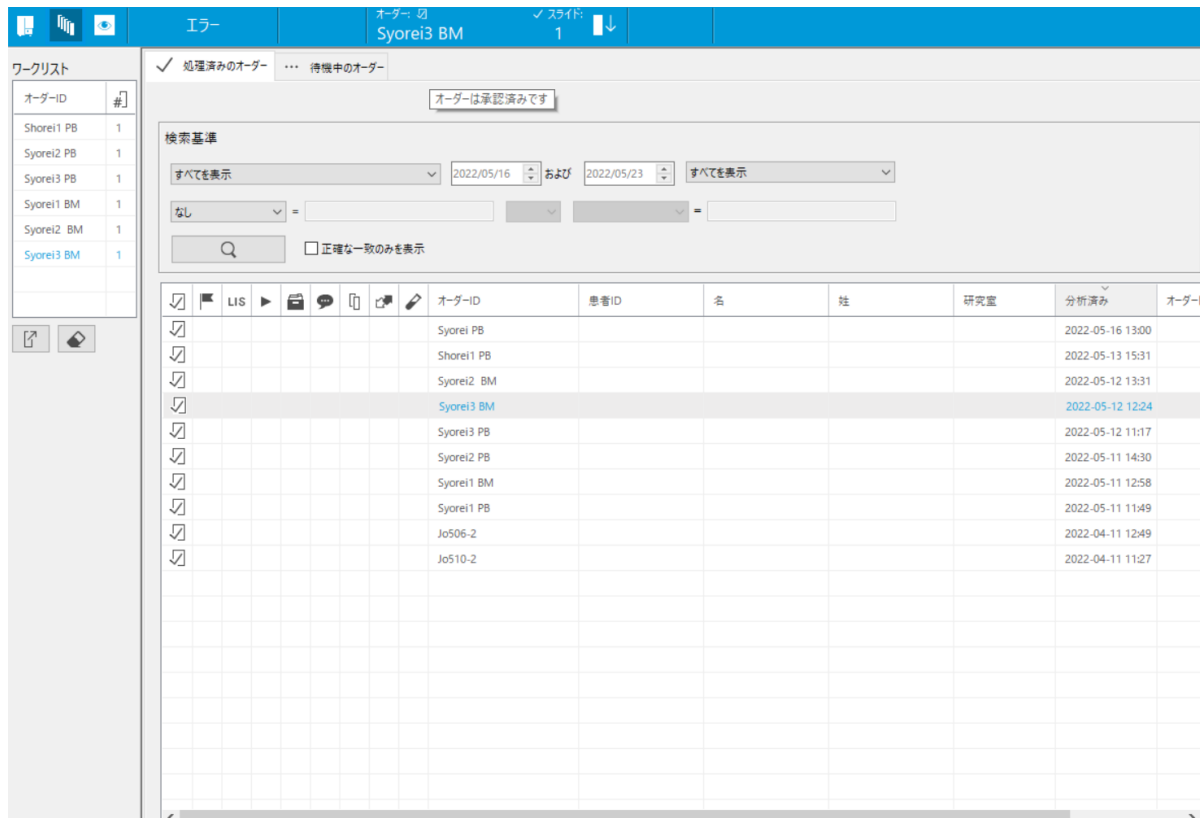
- \*ズームバーや（またはマウスのダイヤル）で拡大、縮小
  - \*左の小さなスミア画面を左クリックで見たい位置に移動
  - \*大きなスミア画面上でマウスの左クリックしながら動かすと見たい場所に移動
- 現在見ている箇所は左スミア画面上に赤線囲いで表示、既に見た箇所は色付で分かるようになっています。

## 次の検体を見る場合



左上のワークリスト上のオーダーIDをダブルクリックするとスミア画面が表示されます。

\*ワークリストにない場合は  クリックすると検体リスト画面が表示されます。



見たい「オーダーID」をダブルクリックします。